

# BENUTZERHANDBUCH

---

*MNPG75-02 Ausgabe 15/05/19*

Magnetfeldtherapie-Matratze

# OSTEOMAT

*I.A.C.E.R. Srl*

*[www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)*

**I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A - 30030

Martellago (VE) ITALIEN

Tel. Tel. +39 041 5401356 - Fax +39 041 5402684

E-Mail: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it)

<http://www.itechmedicaldivision.com>

<i>Inhaltsverzeichnis</i> .....	3
<b>Einführung</b> .....	4
<b>Technische Spezifikationen</b> .....	5
<i>Anwendung</i> .....	6
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	6
<i>Wartung</i> .....	6
<b>Reinigung</b> .....	6
<b>Unterstützung</b> .....	6
<b>Garantie</b> .....	7

## **Einführung**

**OSTEOMAT** ist eine neue Matratze für niederfrequente Magnetfeldtherapie-Behandlungen. Diese Matratze wurde realisiert, um zwei wichtige Anforderungen zu erfüllen: die Langzeittherapie und die Notwendigkeit einer Ganzkörperbehandlung.

Es ist bekannt, dass die Magnetfeldtherapie mit den Zellstrukturen interagiert, indem sie die Wiederherstellung des Gleichgewichts der physiologischen Bedingungen fördert. Gepulste Magnetfelder fördern den Ionenaustausch zwischen den beiden Seiten der Zellmembranen. Diese Aktionen helfen bei der Wiederherstellung des korrekten Transmembranpotentials, das für die Nahrungsaufnahme der Zellen sehr wichtig ist.

Die oben genannten Wirkungen sind gleichbedeutend mit analgetischer Wirkung, Entzündungsreduktion und Ödemresorptionsstimulation.

Darüber hinaus ist die Niederfrequenz-Magnetfeldtherapie besonders zur Stimulation der Frakturheilung und zur Verzögerung der durch **Osteoporose** verursachten Knochendichteverringeringung angezeigt.

Osteoporose ist ein zunehmendes soziales Phänomen und bedarf der Behandlung der gesamten Skelettarchitektur. Zu diesem Zweck ermöglicht die Matratze die Behandlung des gesamten Körpers.

Die neue Matratze **OSTEOMAT** stellt die ideale Lösung für die Ganzkörperbehandlung in einer einzigen Sitzung dar, dank der einfach zu bedienenden Modi und der extremen Flexibilität.

---



**Technische Spezifikationen:**


- Gesamtabmessungen der Matratze: 160x65x2 cm;
- 4 aktive Sektoren;
- 2 Verbindungskabel;
- Geeignet für MAG2000, MAG2000 PLUS und LaMagneto Modelle;
- Nichtgewebte Stoffbahn (Packung mit 2 Stück).

Die Matratze Osteomat besteht aus 4 aktiven Sektoren, die jeweils 2 Magnetspulen enthalten, also insgesamt 8 Magnetspulen.

Achtung: Es wird empfohlen, den Vliesstoff vor der Verwendung auf die Matratze aufzubringen.

Die Konfiguration des Osteomat stimuliert die Körperzonen (Schultern, Wirbelsäule, Becken), die stärker von der Reduktion der Knochenmasse betroffen sind. Dies ist typisch für eine Osteoporose Erkrankung.

Die interne Positionierung der Magnete (durch die Kreise gekennzeichnet) entnehmen Sie bitte der untenstehenden Abbildung.

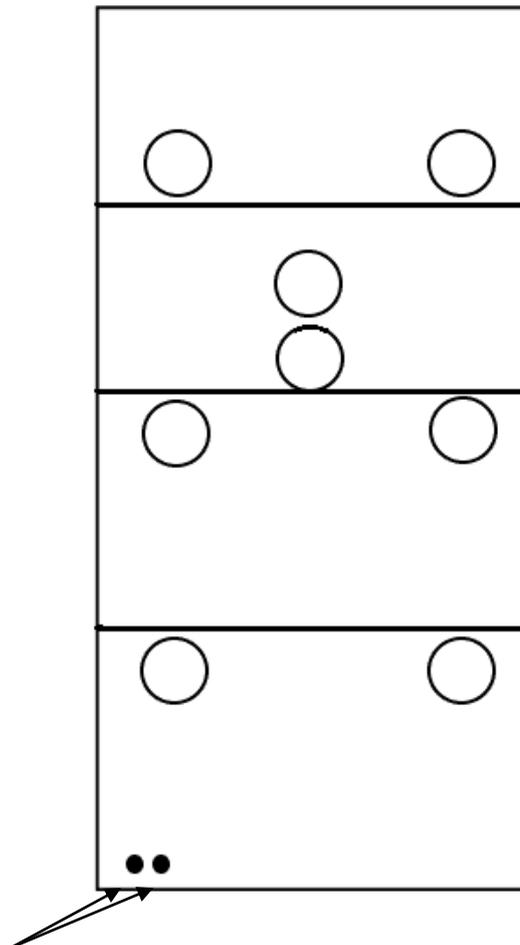

## Anwendung

### **Bedienungsanleitung des Osteomat**

*Für eine einfache und schnelle Anwendung des Osteomat empfehlen wir, die folgende Anleitung zu lesen:*

- 1. Verbinden Sie die beiden Kabel der Matratze mit den Eingängen CH1 und CH2, die sich an der Rückseite des verwendeten Geräts befinden (MAG2000, MAG2000 PLUS oder LaMagneto-Serie);*
- 2. Wählen Sie das Therapieprogramm aus, indem Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch des Geräts folgen;*
- 3. Legen Sie sich auf die Matratze und achten Sie darauf, dies auf der richtigen Seite zu tun, die durch das Etikett als „therapeutisch“ gekennzeichnet ist.*

## Reinigung

### **Reinigung**

*Wir empfehlen, den Osteomat vor der Reinigung der Matratze vom Gerät zu trennen. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem mit Wasser und milder Seife angefeuchteten Tuch und warten Sie die vollständige Trocknung ab, bevor Sie die Matratze wieder für die Behandlung verwenden.*

### **Unterstützung**

*Jede technische Änderung an der Therapiematratze Osteomat darf nur vom Hersteller durchgeführt werden. Für jede technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller:*

**I.A.C.E.R. S.r.l.**

Via S. Pertini, 24/a - 30030 Martellago (VE)

Tel. Tel. +39 0415401356 - Fax +39 0415402684

## **Garantie**

*Für den Osteomat gilt eine 1-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht bei Manipulation, Fahrlässigkeit und/oder unsachgemäßem Gebrauch der Matratze sowie bei Eingriffen durch Personal, das nicht vom Hersteller oder Vertragshändler autorisiert ist.*

OSTEOMAT. Alle Rechte vorbehalten. OSTEOMAT und Logos  sind Eigentum von I.A.C.E.R Srl und sind registriert.



## **I.A.C.E.R. Srl**

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it) - PEC: [iacer@pec.it](mailto:iacer@pec.it) - Web: [www.itechmedicaldivision.com](http://www.itechmedicaldivision.com)

Cod. Fisc. / P.IVA / Vat Number: IT00185480274 - Codice SDI: SUBM70N

R.E.A.: VE N. 120250 - M. VE001767 - Capitale Sociale / Share Capital: € 110.000,00 i.v.

